



LEICHTER ATMEN

mit CEGLA Medizintechnik

Produktkatalog

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS

Atemtherapie	8
RC-Cornet® & RC-Cornet® PLUS Varianten	9
RC-Cornet®	10
RC-Cornet® N	11
RC-Cornet® PLUS	13
RC-Cornet® PLUS NASAL	14
RC-Cornet® PLUS TRACHEO	16
Atemtraining	18
RC-FIT® CLASSIC	19
Inhalationstherapie	22
RC-Chamber®	23
RC-Chamber® für tracheotomierte Patienten	26
Pflege & Hygiene	29
RC-Gel® NASAL	30
RC-Pflege® N	31
RC-Clean®	32
Informationen, Wissen & Service	33
Das Gesundheitsportal – www.leichter-atmen.de	34
CEGLA Social Media	35
Gesamtübersicht aller Produkte	37

LEICHTER ATMEN

Wer an Atemwegserkrankungen leidet weiß, dass dies nicht selbstverständlich ist.

Wir haben es uns zur Kernaufgabe gemacht Atemwegspatient:innen zu einem leichteren Atmen zu verhelfen – dafür entwickeln und vertreiben wir einfache, sichere und hygienische Hilfsmittel. So helfen wir gemeinsam mit Ihnen allen, die ihre individuelle Lebensqualität verbessern wollen, dies möglich zu machen.

Darüber hinaus, teilen wir unser Wissen mit so vielen Menschen wie möglich – in der Produktliteratur, Schulungen und Workshops sowie den sozialen Kanälen.

Auf unserer Gesundheitsplattform leichter-atmen.de erreichen wir jährlich gut 3 Millionen Menschen. Betroffene, Angehörige und Interessierte finden hier Informationen und Hilfestellung über die vielfältigen Möglichkeiten mit einer Atemwegserkrankung gut zu leben.

Wir danken Ihnen für das Interesse und freuen uns jederzeit über Ihre Wünsche und Anregungen.

Ihr Team der
CEGLA Medizintechnik



Atemtherapie

Atemtherapie, Atemtraining und Inhalationstherapie mit den Hilfsmitteln von CEGLA Medizintechnik

Im eigentlichen Sinne spricht man von „Therapie“ im Zusammenhang mit einer Krankheit, diese umfasst i. d. R. eine Kombination verschiedener Behandlungsmaßnahmen.

„Training“ wird i. d. R. im sportlichen Kontext genutzt und bedeutet, dass Aktivitäten zielgerichtet, systematisch und nachhaltig durchgeführt werden. Im Kontext der Atmung werden Atemtherapie und Atemtraining häufig synonym verwendet. Manchmal fällt auch der Begriff „Lungentraining“.

Die Inhalationstherapie kann sowohl die Feuchteinhalation als auch das Einbringen von Medikamenten über Inhalatoren in die Atemwege betreffen.

Mit dieser Übersicht möchten wir Sie informieren, in welchem Kontext wir diese Begriffe nutzen, so dass Sie sich leichter in unserer Produktwelt orientieren können. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

→ Hilfsmittel mit Fokus auf die Ausatmung

Prolongierte Ausatmung gegen einen Widerstand für die Weitung der Atemwege und Sekretolyse (durch die Verbindung mit Oszillationen).

Produkte für die oberen Atemwege

RC-Cornet® N, RC-Cornet® PLUS NASAL

- Starke Sekretolyse durch Oszillationen
- Lindert Husten und hilft bei Nasenspraysucht
- Verbessert Belüftung der Nasennebenhöhlen
Abschwellend und regenerierend, die Gefahr von absteigenden Effekten wird gesenkt.

Produkte für die unteren Atemwege

RC-Cornet®, RC-Cornet® PLUS und RC-FIT® CLASSIC

- Sekretolyse durch Oszillationen
(RC-Cornet® Varianten stärker, RC-FIT® sanfter)
- Weitung der Atemwege
- Linderung von Husten, und Atemnot
- RC-Cornet®/PLUS: Kombination mit Feuchteinhalation möglich

Atemtraining

→ Hilfsmittel mit Fokus auf die Einatmung

Atemmuskeltraining für die Steigerung von Kraft und Ausdauer der Atemmuskulatur (Zwerchfell und Hilfsmuskeln).



Produkte für die unteren Atemwege


RC-FIT® CLASSIC

- Kräftigung der Atemmuskulatur
- Reduktion der Atemfrequenz
- Ruhe und Entspannung bei Stress, Atemnot oder Konzentrationsmangel
- Verbesserung der Atemwahrnehmung und Fähigkeit zur Bauchatmung

Inhalationstherapie

→ Hilfsmittel zur Inhalation von Dosieraerosolen

Inhalation von Medikamentensprays, damit sie in Luftröhre, Bronchien und Lunge ihre Wirkung entfalten können.

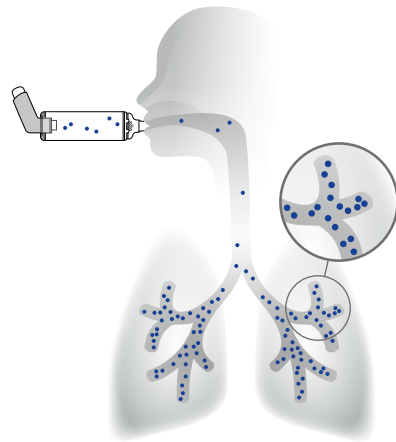

Produkte für die unteren Atemwege

RC-Chamber®

- Verbessert die Medikamentendeposition
- Koordination Auslösen und Einatmen entfällt – erleichtert die Medikamentengabe
- Vermindert Ablagerungen und Pilzbefall im Mund-und Rachentraum

Einatmen. Ausatmen. Aufatmen.

Patienten- und leitliniengerechte Behandlung, ohne Budgetbelastung.



Anwendungsempfehlung:

①

Atemtherapie

zur Weitung der Atemwege für eine optimale Medikamentenaufnahme

+

②

Inhalation

des Medikaments

+

③

Atemtraining


zur Stärkung der Atemhilfsmuskulatur

Notizen



ATEMTHERAPIE

Die ganzheitliche Atemtherapie mit den RC-Cornet® / RC-Cornet® PLUS Varianten

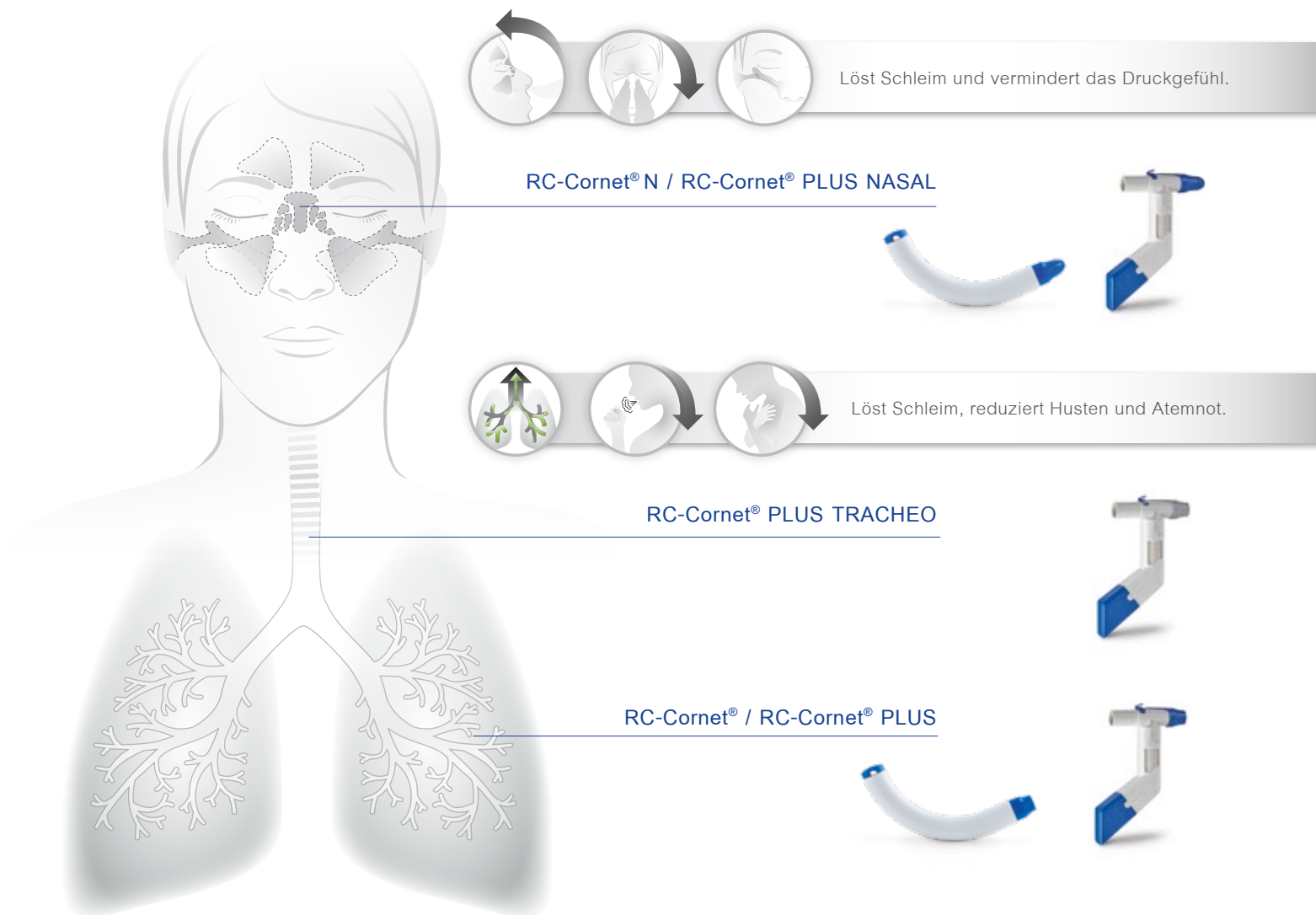

Die Nase reinigt, befeuchtet und erwärmt die eingeatmete Luft. So wird diese optimal auf die unteren Atemwege für den O₂/CO₂-Tausch vorbereitet.

Ist die Selbstreinigungsfunktion der Atemwege durch Erkrankungen oder verstärkte Sekretbildung beeinträchtigt, sollte sofort neben der aus Kindheitstagen bekannten Inhalation auch eine Atemtherapie angewendet werden.

So kann bei regelmäßiger Anwendung einer Verschlechterung vorgebeugt werden. Das Sekret wird nicht nur verflüssigt, sondern durch die Atemtherapie auch abtransportiert.

Alternativ zur Feuchtinhalation besteht die Möglichkeit, durch befeuchtende Nasensprays oder einer Nasenspülung die Reinigungsfunktion der Nase zu unterstützen.

RC-Cornet®

Atemtherapiegerät für die unteren Atemwege – löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot

Studien belegen, dass die regelmäßige RC-Cornet® Therapie den Antibiotikabedarf und die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten reduziert.¹⁾

Produktmerkmale:


- befreit die Atemwege effektiv von festsitzendem Bronchialschleim
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C/Mehr-Patienten-Gebrauch)
- geeignet für Kinder und Erwachsene
- lageunabhängig 



Das RC-Cornet® Mund-Nasen-Set (Artikel-Nr. 2140, PZN 17 170 893) ermöglicht den Umbau zu einem RC-Cornet® N für die Therapie der oberen Atemwege.

RC-Cornet®
PZN 08 418 667
Artikel-Nr. 210

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0004

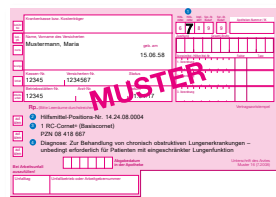

INFO



¹⁾ Studien auf Anfrage erhältlich.

RC-Cornet® N

Atemtherapiegerät für die oberen Atemwege – die sanfte Atemtherapie für eine freie Nase

Das RC-Cornet® N verschafft bei regelmäßiger Anwendung effektiv und auf natürliche Weise eine freie Nase / sekretfreie Nasennebenhöhlen.

Produktmerkmale¹⁾:

- wirkt langfristig abschwellend im gesamten Nasen-Rachen-Raum und befreit von lästigem Schleim im Nasen-Rachen-Raum
- lindert Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom, senkt bronchiale Hyperreagibilität bei Asthma, hilft bei Nasenspraysucht (Privinisismus)
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs (Tubenventilationsstörungen)
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- geeignet für Erwachsene und Kinder
- lageunabhängig 

Das RC-Cornet® Mund-Nasen-Set

(Artikel-Nr. 2140, PZN 17 170 893) ermöglicht den Umbau zu einem RC-Cornet® für die Therapie der unteren Atemwege.



RC-Cornet® N
PZN 08 862 327
Artikel-Nr. 220

INFO




RC NASENCORNET^N
CORNET[®]


¹⁾ Studien auf Anfrage erhältlich.

Die einzigartigen Eigenschaften der RC-Cornet® PLUS Varianten

2 Einstellungen: Mit Einstellung I werden die Atemwege zunächst geweitet für eine anschließende, noch effektivere Schleimlösung mit Einstellung II.

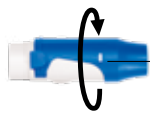


Einstellung I: Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege (StabilizingPEP™)

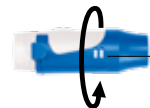

Einstellung II: Mobilisierender Ausatemdruck mit hoher Flussrate zum Sekretabtransport (MobilizingPEP™)*

4 Widerstände: Die verschiedenen Widerstände ermöglichen eine individuelle Atemtherapie auch schon für sehr schwache Patienten (inklusive neuromuskuläre und Schlaganfall-Patienten) durch die Nutzung der kompletten Ausatemluft.

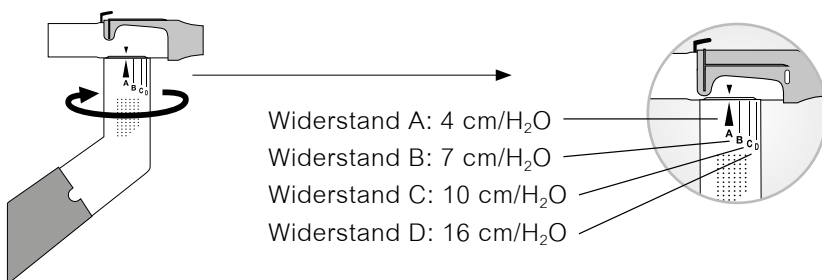

Tipp: Bei tracheotomierten Patienten kann es sinnvoll sein, mit Einstellung II zu beginnen.

Kombi-Therapie: Optionale Verbindung von Atemtherapie und Feuchteinhalation.




RC-Cornet® PLUS
Kombi-Therapie



verkürzte tägliche
Therapiezeit



bessere
Medikamenten-
deposition

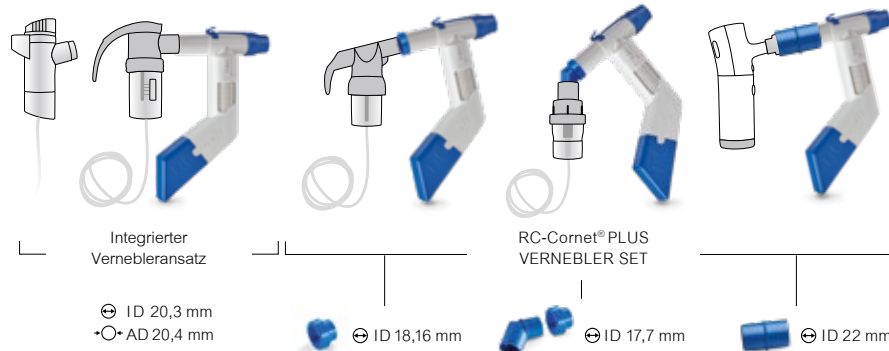

Durch die Weitung der Atemwege in Einstellung I und die gleichzeitige Feuchteinhalation über den integrierten Vernebleransatz wird die Therapie noch effektiver.*

Der integrierte Vernebleransatz ist passend für alle ISO-genormten Vernebler.

Für nicht-ISO-genormte Vernebler: RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET | PZN 14 439 900 | Artikel-Nr. 2651



* Studien auf Anfrage erhältlich

RC-Cornet® PLUS

Atemtherapiegerät für die unteren Atemwege –
wirkt schleimlösend, hustenlindernd und atmungserleichternd

Studien belegen: Bei regelmäßiger Anwendung
werden Klinikaufenthalte und Antibiotikabedarf
deutlich reduziert.¹⁾

Produktmerkmale:

- Weitung der Atemwege (Einstellung I) und Lösung von Bronchialschleim (Einstellung II)
- Verbesserung des Gasaustausches
- In **jeder Einstellung** kann die Intensität des **Widerstandes patientengerecht** in vier Stufen (A–D) eingestellt werden, somit auch für **schwache Patienten** nutzbar
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C/Mehr-Patienten-Gebrauch)
- integrierter, ISO-genormter 22 mm-Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchtinhalation mit Verneblern zur besseren Sekretolyse (Kombi-Therapie)
- lageunabhängig 
- Die RC-Maske für Erwachsene und Kinder kann ergänzend auf das RC-Cornet® PLUS aufgesteckt werden und somit u. a. neurologischen Patienten die Therapie erleichtern



RC-Cornet® PLUS

PZN 12 419 336

Artikel-Nr. 2600

Erstattungsfähig durch den
Haus-, Kinder- oder Lungen-
facharzt unter Hilfsmittel-
Positions-Nr. 14.24.08.0013

INFO

MUSTER

Patienten-Nr. 1234567	
Datum: 15.08.18	
Verordnender Arzt: Dr. Müller, Maria	
Diagnose: Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, z. B. COPD, Lungenerkrankung, CF etc. – unbedingt erforderlich für Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion	
Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013	
PZN 12 419 336	
Artikel-Nr. 2600	

RC CORNET® PLUS

¹⁾ Studien auf Anfrage erhältlich.

RC-Cornet® PLUS NASAL

Atemtherapiegerät für die oberen Atemwege – effektiv, einfach und gut

Studien belegen¹⁾

- dass die regelmäßige RC-Cornet® PLUS NASAL Therapie über 4 Wochen bei 70 von 100 Atemwegspatienten²⁾ zu einer Auflösung der Schleimstraße führte.
- dass der Atemwegswiderstand und die bronchiale Überempfindlichkeit sich gegenüber einer alleinigen Kochsalzinhalation durch die Physiotherapie mit dem RC-Cornet® PLUS NASAL signifikant senken ließen.

Produktmerkmale:

- befreit die oberen Atemwege von Schleim z. B. bei chronischer Sinusitis³⁾
- lindert den Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom
- senkt bronchiale Hyperreagibilität¹⁾ z. B. bei Asthma
- hilft bei Nasenspraysucht (Privivismus)
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
- verbessert auch Erkrankungen der unteren Atemwege wie z. B. COPD oder Asthma
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- integrierter, ISO-genormter 22 mm-Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchtinhalation mit Verneblern zur besseren Sekretolyse (Kombi-Therapie)
- lageunabhängig 

Als Zubehör bieten wir das VERNEBLER SET für nicht genormte Vernebler an.



RC-Cornet® PLUS NASAL

PZN 12 441 330

Artikel-Nr. 2680



¹⁾ Studien auf Anfrage erhältlich.

²⁾ Atemwegspatienten (COPD & Asthma, die zusätzlich unter einem Postnasal-Drip litten).

³⁾ Bei starker Polypenbildung ist der Therapieverlauf nicht absehbar.


Freie Nase ohne Medikamente

Einzigartig für Ihre Gesundheit

Das RC-Cornet® PLUS NASAL befreit die oberen Atemwege sanft von Schleim. Die Schleimhaut kann sich so bei regelmäßiger Anwendung wieder regenerieren. Die Nase wird besser belüftet und spürbar freier – **ganz ohne den Einsatz von Medikamenten.**


Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit, z. B. bei Asthma, wird gesenkt.

Bei der Ausatmung über das RC-Cornet® PLUS NASAL entsteht ein individuell einstellbarer, positiver Ausatemdruck mit Schwingungen, der die Schleimhäute in den oberen Atemwegen therapiert – vergleichbar mit einer Massage.

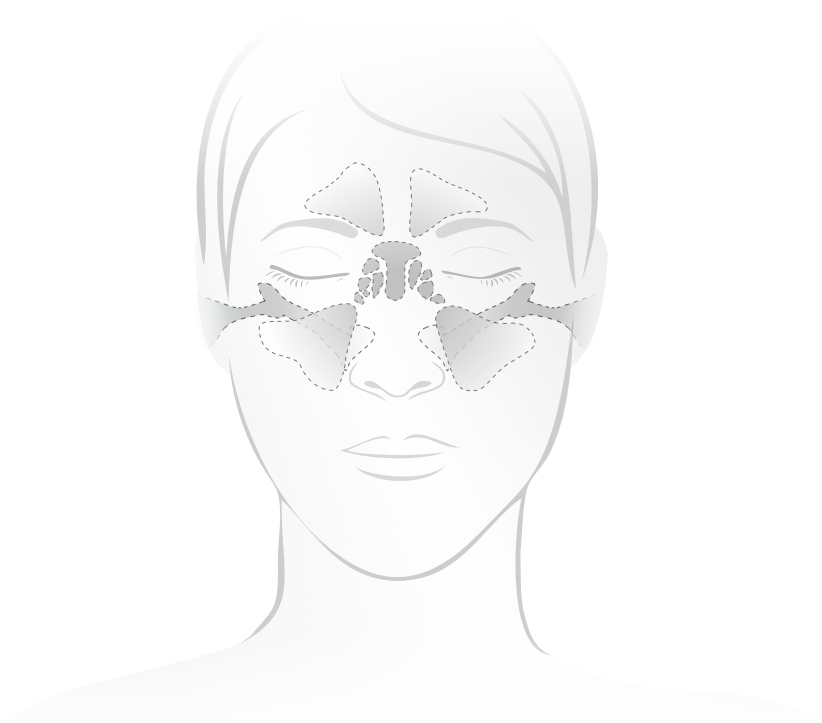

Besitzen Sie schon ein RC-Cornet® PLUS?

Rüsten Sie es in ein RC-Cornet® PLUS NASAL um:

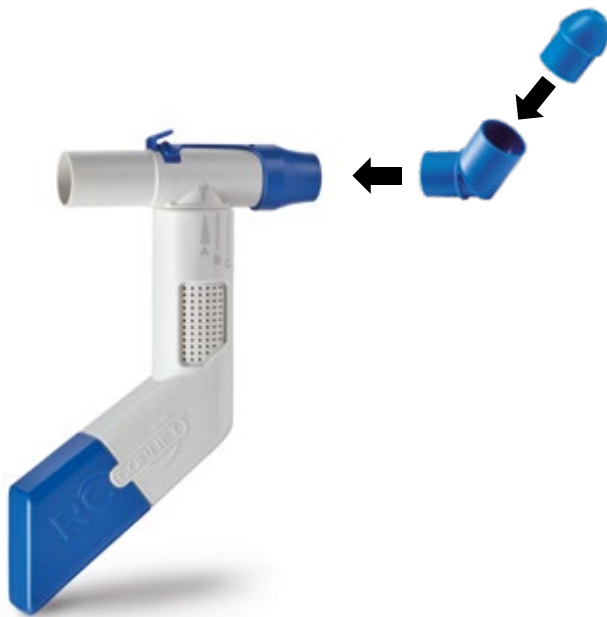

Atemtherapie obere Atemwege
Umrüstung RC-Cornet® PLUS mit
RC-Cornet® PLUS NASAL SET

INFO

RC-Cornet® PLUS NASAL SET
(Winkelstück und Nasenolive)
PZN 13 058 202
Artikel-Nr. 2683

RC PLUS **CORNET® NASAL**

RC-Cornet® PLUS TRACHEO

Einzigartige Schleimlösung für mehr Lebensqualität bei Tracheostomie

Das RC-Cornet® PLUS TRACHEO ist eine Variante des RC-Cornet® PLUS.

Über einen integrierten Tracheoansatz (15 mm) ermöglicht das RC-Cornet® PLUS TRACHEO Patienten mit einer Kanüle (Tubus) die Atemtherapie zur Schleimlösung.

Produktmerkmale:

- löst Schleim, reduziert Atemnot und erleichtert das Absaugen
- das RC-Cornet® PLUS TRACHEO bietet die gleichen Produktmerkmale wie das RC-Cornet® PLUS
- speziell für tracheotomierte und sehr schwache Patienten geeignet
- Unterstützung beim Weaning
- integrierter, ISO-genormter 22 mm-Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchtinhalation mit Verneblern zur besseren Sekretolyse (Kombi-Therapie)

Als Zubehör bieten wir das RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET für nicht genormte Vernebler an.




RC-Cornet® PLUS TRACHEO

PZN 12 441 324

Artikel-Nr. 2690

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013

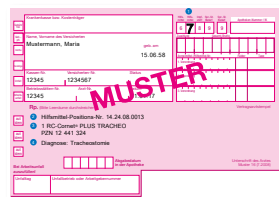

INFO



Anwendung bei Patienten mit offenem Tracheostoma



Notizen



ATEMTRAINING

RC-FIT® CLASSIC

Atemtherapie und Atemtraining mit Oszillationen und Tönen:
fitter, entspannter und leistungsfähiger.

Das RC-FIT® CLASSIC ist ein einzigartiger, sound-erzeugender, oszillierender, in- und expiratorischer Atemtrainer. Entspannungs- und Atemtherapiegerät in EINEM.

Ob zur Prävention, Rehabilitation, gezielten Steigerung der Fitness oder puren Entspannung – der Effekt des RC-FIT® CLASSIC ist sofort und überall spürbar.

- Trainiert die Ein- und Ausatemhilfsmuskulatur
- Hält die Atemwege offen
- Löst Sekret mit Oszillationen
- Reduziert Husten und Atemnot
- Reduziert die Atemfrequenz
- Beruhigt und entspannt
- 4 Intensitätsstufen
- Klein, handlich im Hosentaschenformat
- Ateminfo: langsame Ein- und Ausatmung über den Mund
- Lageunabhängig
- Entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene
- Die RC-Maske Tracheostoma ermöglicht tracheotomierten Patienten die Atemtherapie und das Atemtraining mit dem RC-FIT® CLASSIC.



RC-FIT® CLASSIC

PZN 17 875 642

Artikel-Nr. 2631

Hilfsmittel-Positions-Nr.

14.24.08.0018

INFO

MUSTER

Patienten-Information	
Name: Muster, Maria	
Geburtsdatum: 15.08.55	
Geburtsort: 12345	
PLZ: 12345	
Strasse: 12345	
Telefon: 12345	
E-Mail: 12345	
Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0018	
1 RC-FIT® CLASSIC / PZN 17 875 642	
Diagnose: chronische Atemwegserkrankung wie COPD, Asthma bronchiale oder auch Long-Covid mit einer wiederkehrenden oder gleichzeitigen Verschlechterung der Atemleistung	
Anwendung: 1x täglich	
Anmerkung: 12345	



RC-FIT® CLASSIC die einzigartige, sounderzeugende Vibrationsplatte für Lunge und Zwerchfell:



Vibrationen stimulieren **beim Einatemtraining** die Atemmuskulatur. Entsprechend wird das Training als nicht so anstrengend empfunden, Sekrete werden schon bei der Einatmung gelöst.

Bei der **Ausatmung** werden die Atemwege offen gehalten. Vibrationen an der Schleimhaut lösen zusätzlich Sekret. Atemnot und Husten werden gelindert. Die tiefen, gleichmäßigen Töne beruhigen.



Zur **Behandlung von Atembeschwerden**, z. B. bei Long-/Post-COVID, COPD, Asthma bronchiale, Mukoviszidose (CF) sowie Rehabilitation nach Erkrankungen und Operationen oder auch Stress.

Zur **präventiven Anwendung** für mehr Leistungsfähigkeit im Alltag oder bei sportlichen Aktivitäten, Yoga & Mentaltraining (Mental Health).



Therapie & Training mit dem RC-FIT® CLASSIC

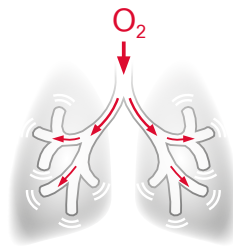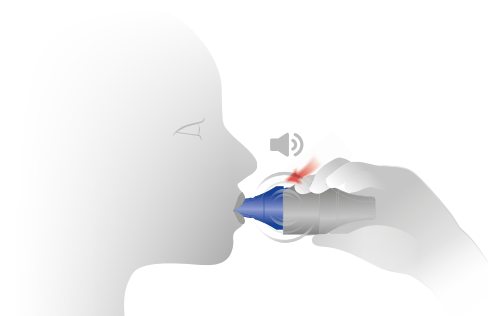

Tief in den Bauch einatmen
Bis 4 Sekunden.
Der Bauch wölbt sich vor
und der Brustkorb hebt sich.

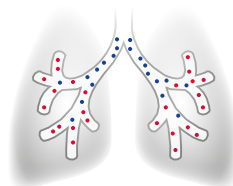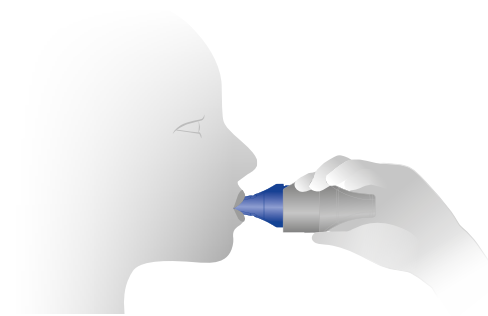

Halten
Bis 7 Sekunden.

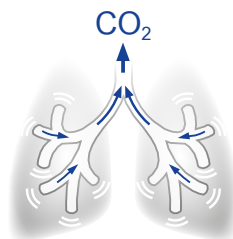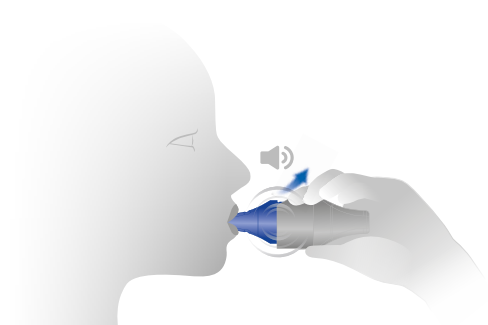

Ausatmen
Doppelt so lange wie
die Einatmung.
Der Bauch wölbt sich
sanft nach innen.



Atmung ist der Schlüssel zu mehr Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Regeneration und Stressbewältigung!

Nur das RC-FIT® CLASSIC verbindet Atemmuskulaturtraining und Atemphysiotherapie mit Oszillationen (Schwingungen) und Tönen.

- ⊕ **Kräftigt Atemmuskulatur:**
Zwerchfell und Hilfsmuskel.
- ⊕ **Weitet Atemwege:**
Verbessert den Gasaustausch.
- ⊕ **Löst Sekret:**
Reinigt und befreit die Atemwege.
- ⊕ **Gibt Ruhe und Fokus:**
Bei Stress, Atemnot, Konzentrationsmangel.
- ⊕ **Hilft, Verspannungen zu lösen:**
Lindert Spannungsschmerzen.

*Fitter, entspannter
und leistungsfähiger!*



Tief einatmen,
sanft ausatmen,
Gesundheit stärken



INHALATIONSTHERAPIE

RC-Chamber®

Sicherheit für jedes Alter

Die Inhalierhilfe RC-Chamber® von CEGLA Medizintechnik ergänzt diese Wirkweise zudem mit einem einzigartigen Schutzengelkonzept – für noch mehr Sicherheit im Alltag:

- 1. Sicherheitsbeutel:** Die wiederverschließbare Umverpackung des RC-Chamber® dient als Sicherheitsbeutel, in dem alle Utensilien kompakt und sicher vor Staub- bzw. Schmutzpartikeln verstaut werden können.
- 2. Notfallplan:** Der ausgefüllte Notfallplan wird direkt auf der Rückseite des Sicherheitsbeutels angebracht. Im Notfall erhält so jeder eine Anleitung, um helfen zu können.
- 3. Schutzengel-Anhänger:** Lochen Sie den Sicherheitsbeutel, befestigen Sie den Schutzengel-Anhänger am Sicherheitsbeutel und setzen Sie ein Signal für den Notfall.

Bitte vor der ersten Anwendung die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen.

Das patentierte
**Schutzengel
konzept**



Einatemkontrolle: Das Ventil des RC-Chamber® ist gleichzeitig die integrierte, optische Einatemkontrolle. Gerade im Notfall gibt diese Rückmeldung, ob und wie inhaliert wird.

Austauschbare Silikonmasken: Die Masken stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung und passen sich weich und angenehm der Gesichtsform an.

Hygienisch: Zuverlässige Reinigung bis zu einer maximalen Temperatur von 100 °C oder im RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle.

Transparentes Design: Patienten erkennen Fremdkörper und Verunreinigungen, bevor sie einatmen.

Universaladapter: mit allen Dosieraerosolen kompatibel.



RC CHAMBER®

RC-Chamber®


Tief durchatmen – leicht gemacht

Produktmerkmale:


- Inhalierhilfe bei chronischen Atemwegserkrankungen
- die Koordination zwischen Auslösen und Einatmen des Dosieraerosols entfällt
- filtert die großen, nicht lungengängigen Partikel aus, vermindert so Ablagerungen und Pilzbefall im Mund- und Rachenraum
- der RC-Chamber® verhindert Reizungen durch Verdunstungskälte
- die therapeutische Wirkung der Medikamente wird optimiert
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch
- **transparentes Design** – Sie erkennen Fremdkörper und Verunreinigungen, bevor Sie einatmen
- **Universaladapter** – mit allen Dosieraerosolen kompatibel
- **austauschbare Silikonmasken** – Masken stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung – passen sich weich und angenehm der Gesichtsform an



Die Wirkung der RC-Chamber® Therapie

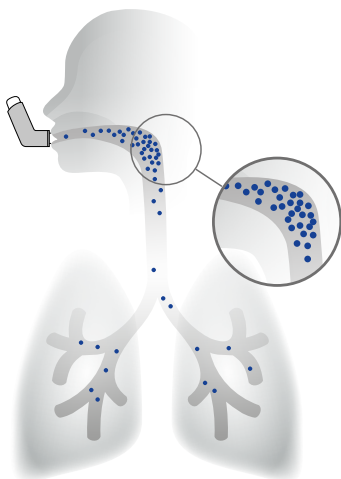

Ohne RC-Chamber® kommt es zu einer starken Medikamentenablagerung im Mund- und Rachenraum.

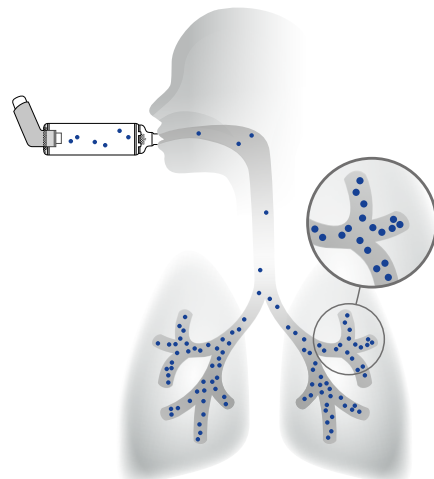

Mit RC-Chamber® werden große, nicht lungengängige Partikel ausgefiltert. Dadurch verbessert sich die Medikamentenverteilung in der Lunge.



RC-Chamber®

Mit dem Schutzengelkonzept im Alltag und im Notfall gerüstet



Der Sicherheitsbeutel

Die wiederverschließbare Umverpackung des RC-Chamber® dient als Sicherheitsbeutel. Er fasst den RC-Chamber® mit und ohne Maske, das Medikamentenspray, ein Peak-Flow-Meter sowie alle wichtigen Medikamente.



Die Einatemkontrolle

Das Ventil des RC-Chamber® ist gleichzeitig die integrierte, optische Einatemkontrolle. Sie ist für jedermann sichtbar. Gerade im Notfall gibt diese Rückmeldung, ob und wie oft inhaliert wird.



Der Schutzengel-Anhänger

Lochen Sie den Sicherheitsbeutel oberhalb des Druckverschlusses. Befestigen Sie den Schutzengel-Anhänger am Sicherheitsbeutel und setzen Sie ein Signal für den Notfall.



Der Notfallplan

Der ausgefüllte Notfallplan wird direkt auf der Rückseite des Sicherheitsbeutels / Umverpackung angebracht, sodass jedem ersichtlich ist, wie dem Betroffenen im Notfall geholfen werden kann.



RC-Chamber®:
Die einzige Inhalierhilfe
mit einem patentierten
Schutzengelkonzept!



Hygienisch zuverlässige Reinigung bis zu einer maximalen Temperatur von 100 °C oder im RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle.

Einfach in der Anwendung, Inhalierhilfe für Kinder, Säuglinge und Erwachsene verfügbar. Masken einzeln erhältlich und austauschbar.

Sicher im Alltag und im Notfall. Mit Notfallplan, Einatemkontrolle und Sicherheitsbeutel.



RC-Chamber® für tracheotomierte Patienten

Ermöglicht tracheotomierten und Weaning-Patienten die Inhalation mit Dosieraerosolen.¹⁾

Die Inhalierhilfe ist für kanülierte als auch für Patienten mit einem offenen Tracheostoma geeignet.

Produktmerkmale:

- optimiert die therapeutische Wirkung der Medikamente nach einem Luftröhrenschnitt
- bietet tracheotomierten Patienten alle Vorteile der Inhalationstherapie
- kann ohne Maske direkt mit der Trachealkanüle verbunden werden
- über die RC-Maske Tracheostoma (Artikel-Nr. 3012 / PZN 11 188 165) kann der RC-Chamber® auch bei offenem Tracheostoma angewendet werden




- die optische Einatemkontrolle zeigt der pflegenden Person, wann das Medikament eingeatmet wird

RC-Chamber® für tracheotomierte Patienten

Artikel-Nr. 30450

PZN 12 731 648

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.03.1001

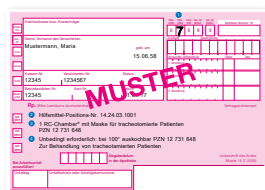


RC-Chamber® Varianten

Alle RC-Chamber®-Varianten mit dem patentierten Schutzengelkonzept:

 		RC-Chamber® Set für Säuglinge 0–1 Jahre, mit Maske	11 710 992	30100
		RC-Maske für Säuglinge 0–1 Jahre (separat erhältlich)	14 164 981	30110
 		RC-Chamber® Set für Kleinkinder 1–5 Jahre, mit Maske	11 711 000	30200
		RC-Maske für Kleinkinder 1–5 Jahre (separat erhältlich)	14 164 998	30210
 		RC-Chamber® mit Mundstück für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren	11 711 023	30300
		RC-Chamber® Set für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren mit Maske	11 711 017	30400
		RC-Maske für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren (separat erhältlich)	14 165 006	30410
		RC-Chamber® für tracheotomierte Patienten 15 mm ID RC-Maske Tracheostoma (separat erhältlich)	12 731 648 11 188 165	30450 3012

Der RC-Chamber® kann durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt auf Rezept verordnet werden.

Alle RC-Chamber®-Modelle sind unter der Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.03.1001 in Verbindung mit der für Sie passenden PZN verordnungs- und erstattungsfähig.

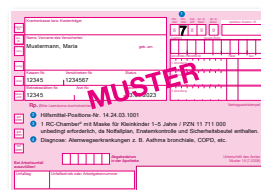

Notizen



PFLEGE UND HYGIENE

RC-Gel® NASAL

Wohltuende Pflege für die Nase

Versorgt bei trockener Nase die Nasenschleimhäute mit natürlicher Feuchtigkeit. Speziell für Sauerstoffpatienten geeignet.

Feuchtigkeit, wertvolle Inhaltsstoffe und eine regelmäßige Behandlung sind ausschlaggebend für das Wohlbefinden unserer Haut.

Produktmerkmale:

- rein natürliche Inhaltsstoffe
- tägliche Pflege der Nase zur Infektvorbeugung, begleitend zur Sauerstofftherapie und zur Behandlung chronischer Beschwerden geeignet
- isotonische Meersalzlösung befeuchtet die Atemwege und beruhigt gereizte Haut
- Hyaluronsäure regt die Zellenneubildung an
- Menthol erweitert die Blutgefäße und erzeugt ein angenehmes Erfrischungsgefühl in der Nasenhöhle
- Dexpanthenol pflegt gereizte Haut und unterstützt den Heilungsprozess

Anwendungsgebiete:

- Hautreizungen am Naseneingang
- trockene und gereizte Schleimhäute
- verstopfte Nase
- allergische Beschwerden (Heuschnupfen, Hausstaubmilbe, Pollenallergie)
- chronische Sinusitis



RC-Gel® NASAL


Inhalt 20 ml

PZN 12 510 686

Artikel-Nr. 260

INFO

Anwendung RC-Gel® NASAL¹⁾

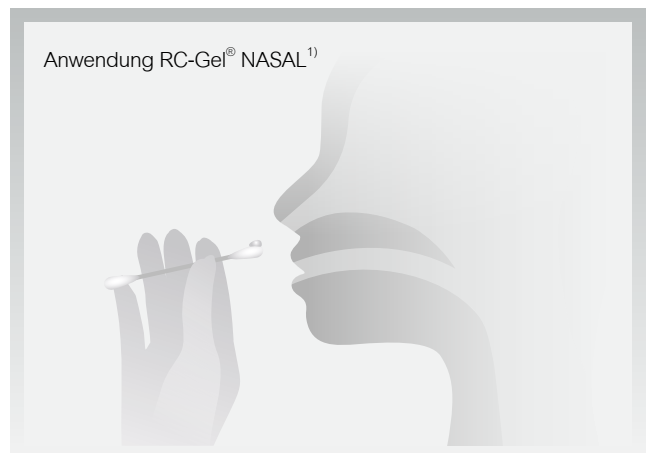

RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray

Reinigt und schützt Ihre Schleimhäute – effektiv und natürlich


RC-Pflege® N¹⁾ wirkt pflegend, auch bei der Zufuhr von Sauerstoff.

Produktmerkmale:


- zur Befeuchtung der Nasen- und Rachenschleimhaut
- unterstützt die Regeneration sowie Wundheilung der Nasenschleimhäute
- reinigt die Nasennebenhöhlen von Staub, Pollen, Allergenen und trockenen Krusten
- begleitende Therapie bei Schnupfen, Heuschnupfen und ganzjährig allergischem Schnupfen
- täglich und dauerhaft anwendbar, ohne davon abhängig zu werden
- ohne Konservierungsstoffe und Treibgas



Anwendung RC-Pflege® N
als Nasenspray

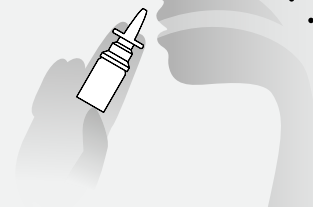

Anwendung RC-Pflege® N
als Rachenspray

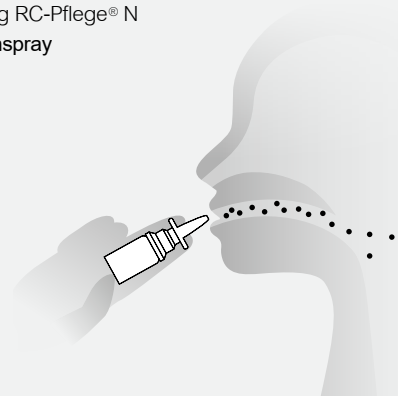

RC-Pflege® N

Inhalt 20 ml

PZN 06 415 162

Artikel-Nr. 250

INFO

RC PFLEGE^N

¹⁾ Zusammensetzung: Isotonische Kochsalzlösung mit 2 % Dexpanthenol

RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle

Reinigen wie die Profis – einfach, schnell und sicher

Der RC-Clean® Reinigungsbeutel ermöglicht die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten und Babyartikeln in der Mikrowelle.

Produktmerkmale:

Für die Reinigung eignen sich alle Produkte, die auskochbar und mikrowellengeeignet sind, wie z. B.:

- die gesamten RC-Cornet® PLUS Varianten
- die gesamten RC-Cornet® Varianten
- die gesamten RC-Chamber® Varianten
- alle Masken zur Inhalation
- Schnuller und Babyflaschen

Mikrobiologische Untersuchungen bestätigen die Effektivität des RC-Clean® Reinigungsbeutels.¹⁾

Produktdetails:

Eine Packung enthält 5 RC-Clean® Reinigungsbeutel. Ein RC-Clean® Reinigungsbeutel kann bis zu 20 Mal wiederverwendet werden.



RC-Clean® Reinigungsbeutel

PZN 10 751 032

Artikel-Nr. 5000

INFO





INFORMATIONEN, WISSEN UND SERVICE

Das Gesundheitsportal für Atemwegspatienten.



KOSTEN-
FREI

Leicht verständliche Informationen rund um Atmung und Gesundheit bei COPD, Lungenemphysem sowie Asthma.

Jährlich nutzen rund 2 Millionen Menschen die Fachartikel, wöchentliche News und monatlichen Newsletter. Ergänzt um die hochgeschätzten Blogger, ist eine Gemeinschaft entstanden, die wichtigen Kontakt und Austausch untereinander ermöglicht.

Zeit in der Beratung ist leider oft knapp und auch nach dem Gespräch kommen weitere Fragen auf. Empfehlen auch Sie Ihren Atemwegspatienten praxisbegleitend das kostenfreie Gesundheitsportal.



Besuchen Sie uns unter:
www.leichter-atmen.de

www.leichter-atmen.de ist ein Service der

CEGLA
MEDIZINTECHNIK



cegla.de

Die Unternehmens-Webseite bündelt jegliche Informationen. Details zu allen Produkten, Gebrauchsanweisungen, Kataloge und Prospekte, Wissen zu spezifischen Krankheitsbildern und vieles mehr. Möchten Sie regelmäßig Informationen direkt in Ihr E-Mail-Postfach erhalten, haben Sie unter diesem Link direkt die Möglichkeit unseren **Fach-Newsletter zu abonnieren**.



www.cegla.de/service/newsletter



YouTube

Auf der Video-Plattform finden Sie unser gesamtes Angebot an Informations- und Schulungsfilmen. Benötigen Sie diese oder Ausschnitte davon, sprechen Sie uns bitte an.



www.youtube.com/user/ceglaTV



LinkedIn

Das Business-Netzwerk wächst und hat sich als Informationsmedium im beruflichen Umfeld etabliert. Entsprechend kommunizieren wir hier die relevanten Inhalte.



www.linkedin.com/company/cegla-medizintechnik/



Social-Media

Facebook, Instagram und auch Pinterest – jeder Kanal hat seine unterschiedlichen Nutzer. Um möglichst breit zu informieren, finden Sie uns auch hier.



www.facebook.com/cegla-medizintechnik



www.instagram.com/cegla-medizintechnik/



www.pinterest.de/CEGLA_Medizintechnik/



Notizen

Gesamtübersicht aller Produkte

Bestellungen bitte an: bestellung@ceгла.de

Produktfoto	Produktname/Hilfsmittel-Positions-Nr.	Beschreibung/Funktion	PZN	Artikel-Nr.
Atemtherapie				
RC-Cornet® PLUS Familie		RC-Cornet® PLUS erstattungsfähig unter 14.24.08.0013	Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot	12 419 336 2600
		RC-Cornet® PLUS TRACHEO erstattungsfähig unter 14.24.08.0013	Manuelle Schleimlösung bei Tracheostomie	12 441 324 2690
		RC-Cornet® PLUS NASAL	Freie Nase – ohne Medikamente	12 441 330 2680
		RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET*	Ermöglicht die Verbindung mit nicht genormten Verneblern bei der Kombi-Therapie	14 439 900 2651
		RC-Cornet® PLUS NASAL SET (Winkelstück und Nasenolive)	Zur Umrüstung auf RC-Cornet® PLUS NASAL, ermöglicht Anwendung der Kombi-Therapie	13 058 202 2683
		RC-Cornet® PLUS ERSATZSET	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	17 170 887 2641
		RC-Cornet® PLUS Mundstück oder Verlust	Ersatz für Umrüstung, Verschleiß	13 348 503 2620
		RC-Cornet® PLUS Tracheoansatz oder Verlust	Ersatz für Umrüstung, Verschleiß	13 348 532 2621
RC-Cornet® Familie		RC-Cornet® PLUS Schlauch 2er-Set	Passend für alle Produktvarianten des RC-Cornet® PLUS, Silikon	13 058 194 2660
		RC-Cornet® erstattungsfähig unter 14.24.08.0004	Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot	08 418 667 210
		RC-Cornet® N	Freie Nase – ohne Medikamente	08 862 327 220
		RC-Cornet® Mund-Nasen Set	Ermöglicht den Umbau der RC-Cornet®/RC-Cornet® N Familie sowie Ersatz bei Verschleiß oder	17 170 893 2140
		RC-Cornet® / RC-Cornet® N Silikon-Ersatzventilschlauch 2er-Set, Silikon	Passend für RC-Cornet® und RC-Cornet® N	00 458 147 216

Produktfoto	Produktname/ Hilfsmittel-Positions-Nr.	Beschreibung/Funktion	PZN	Artikel-Nr.
Atemtraining und Atemtherapie				
	RC-FIT® CLASSIC erstattungsfähig unter 14.24.08.0018	Oszillierendes Atemtraining (OIMT) und Atemtherapie (OPEP) sowie Entspannung in EINEM	17 875 642	2631
Inhalationstherapie				
	RC-Chamber® erstattungsfähig unter: 14.24.03.1001 · für Säuglinge 0 – 1 Jahr mit Maske · für Kleinkinder 1 – 5 Jahre mit Maske · für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren mit Maske · mit Mundstück für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren · für tracheotomierte Patienten	Inhalierhilfe inkl. Sicherheitsbeutel, Notfallplan und Schutzengel-Anhänger 	11 710 992 11 711 000 11 711 017 11 711 023 12 731 648	30100 30200 30400 30300 30450
	RC-Maske für Säuglinge 0 – 1 Jahr	Passend für RC-Chamber® und RC-Chamber® reusable	14 164 981	30110
	RC-Maske für Kleinkinder 1 – 5 Jahre	Passend für RC-Chamber® und RC-Chamber® reusable	14 164 998	30210
	RC-Maske für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren	Passend für RC-Chamber® und RC-Chamber® reusable	14 165 006	30410
	RC-Maske Tracheostoma 0 – 99 Jahre	Passend für RC-Chamber®, RC-Chamber® reusable, RC-Cornet® und RC-Cornet® PLUS	11 188 165	3012
Hygiene				
	RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle, 5 Stück pro Packung	Hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten und Babyartikeln in der Mikrowelle	10 751 032	5000
Pflege				
	RC-Gel® NASAL	Wohltuende Pflege für die Nase speziell für Sauerstoffpatienten geeignet	12 510 686	260
	RC-Pflege® N	Nasen- & Rachenspray	06 415 162	250

Bestellungen bitte an: bestellung@cegla.de



Weitere Informationen
und Filme finden Sie unter
www.cegla.de

CEGLA Medizintechnik ist Pionier in der Atemtherapie!

Die Apothekerin Ruth Cegla und ihr Mann, der Pneumologe Prof. Dr. med. Ulrich Cegla, haben atemtherapeutische Hilfsmittel neu erfunden, patentiert und weiterentwickelt. Innovationen, die bis heute einzigartig auf dem Markt sind: die oszillierenden Atemphysiotherapiegeräte RC-Cornet® und dessen Weiterentwicklung RC-Cornet® PLUS sowie das neueste Produkt RC-FIT® – welches erstmalig Atemphysiotherapie und Atemmuskeltraining mit Oszillation in EINEM ermöglicht.

In zweiter Generation führt heute ihre Tochter Andrea, gemeinsam mit ihrem Mann Jens Ebinger, das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft.

Gegründet 1982 in Deutschland – seit vielen Jahren weltweit aktiv. Gedacht und gemacht in Montabaur. Jedes einzelne Produkt wird per Hand konfektioniert, kontrolliert und sicher verpackt. Diese Verlässlichkeit findet auch international hohe Anerkennung.

Ein echtes Familienunternehmen, in dem die Patienten und das leichtere Atmen im Mittelpunkt stehen.

CEGLA Medizintechnik ist Mitglied bei



und unterstützt zudem viele Patientenorganisationen im Bereich chronischer Atemwegserkrankungen. Mehr dazu unter <https://www.cegla.de/unternehmen/ueber-uns>



Unser Gesundheitsportal bietet Patient:innen, Angehörigen und Interessierten umfangreiche Informationen und Hilfestellungen zu Atemwegserkrankungen.



CEGLA Medizintechnik GmbH
Horresser Berg 1
DE-56410 Montabaur
Tel +49 2602 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de

Copyright 2023 by CEGLA Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen CEGLA Medizintechnik GmbH.

Bitte Gebrauchsanweisung lesen. Produktabbildungen können in Form und Farbe vom Original abweichen.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK